



Getinge Novito 8666

清洗消毒器

高品质清洗消毒器

Getinge 86 系列清洗消毒器是 Getinge 清洗消毒器家族的明星。该系列产品经过 30 多年的发展，不断完善和提升，以其高效、可靠、稳定、经济的性能赢得了全球 CSSD 客户的信任和喜爱。

全新的 Getinge Novito 8666 清洗消毒器是在 Getinge 86 系列清洗消毒器的经验和基础上，为中国客户打造的高性能、大产量清洗消毒器。可满足消毒供应中心、临床科室、诊所及其它实际应用的需求。

智能控制—触手可及

多样化的程序、省时功能，以及集成式过程监控功能（如由流量计控制的加液泵、循环水压力监控）确保良好的清洁效果，同时实现高效率、大产能。这正是当下快节奏的医疗保健环境所需要的。

通过全新 CENTRIC 界面，相关信息均在高分辨率的大屏幕中显示，让操作人员一目了然。Getinge CENTRIC 提供特制的引导界面，在每种情况下仅显示操作人员需要的信息。该直观的引导界面旨在降低人为失误，使用户可在短时间内学会正确操作清洗消毒器。同时可支持操作人员自行解决使用过程中遇到的问题，保持物品处理流程顺畅，确保正常运行时间。

Getinge Novito 8666 为您提供了更为人性化的控制系统以及完善的数字式过程记录让所需信息触手可及。

GETINGE 



全面智能化

- **器械周转快**

最终漂洗水箱（预热水箱）对最终漂洗消毒的水进行预热，大大缩短循环时间。

- **大处理量**

有效利用腔体容积，提高装载量，节省 CSSD 空间。

- **用户界面直观易用**

高清大屏幕中文触摸屏不仅操作简便，而且可直观显示清洗循环进程，在远处也清晰可见，同时菜单具有引导功能。

- **节省资金，保护环境**

高效的设计减少耗水及耗能，降低每个过程成本。

- **人性化设计**

控制面板高度适中，易于操作。

- **优化效率**

预设程序组，可提高工作效率，确保清洗质量。





- **提升有效工作时间**

通过 Getinge ONLINE 可访问实时和历史过程信息，据此来安排预防性维护，增加有效工作时间。

- **独立清洗剂存放空间**

设有独立封闭的化学剂容器放置空间，可放 4 桶 5L 化学剂，化学剂使用更方便卫生。

- **卫生学设计，易于清洁**

优质抛光不锈钢表面、圆角设计，少接缝、抗菌操作面板，可实现快速、简便的清洁。

- **独立排水泵设计**

排水过程设有排水泵，将水迅速从水槽排空，减少污染物残留的时间。

- **过程监控与记录**

监测并记录所有循环性能数据 – 通过 CENTRIC 用户界面可即时访问。

记录可打印，也可用 USB 进行存储，或者可由 T-DOC 无菌供应管理和追溯系统读取。

CENTRIC 用户界面 助您成为专家

Getinge 全新的 CENTRIC 界面是一款高度创新且以用户为中心设计的系统，是我们根据客户的反馈意见及对客户情况的深入了解后设计的产品，有助于实现良好的用户体验。

直观的用户界面

CENTRIC 按逻辑顺序清晰地显示所有信息，例如：剩余过程时间或启动选择。

- 易于掌握 - 减少培训需要
- 清晰简洁的信息 - 降低出现人为错误的风险

更高的用户满意度

大尺寸、高分辨率彩色显示屏易于读取，员工从远处即可清晰地查看和监视进度状态，从而提高用户满意度和生产效率。凭借 CENTRIC 用户界面，Getinge 在提供以用户为中心的创新型综合解决方案方面更进一步，提高了处理效率。



状态一目了然



清晰简洁的信息



信息提示



屏幕上显示指导信息

实时掌控

Getinge ONLINE

与我们最新系列产品中的其他设备一样，Getinge Novito 8666 可全天候 24 小时与 Getinge ONLINE 连接。Getinge ONLINE 是一种特定的加密服务，通过连接电脑或智能手机即可访问您的设备中的信息。

- 实时和历史循环性能信息
- 机器使用情况和效率报告
- 快速提供故障排除通知和错误消息

T-DOC

Getinge 的器械追溯与资产管理解决方案，专为您器械的各方面管理而研发。T-DOC 通过为您提供器械和相关物品的实时概况，可使您优化投资并确保医院整体高质量地运作。T-DOC 可通过记录器械在整个使用周期内的情况将其与过程、具体操作、使用者关联在一起以确保可追溯性。在您需要器械时可随时查看，了解器械的所在位置。



监视屏 通过监视屏可查看设备当前状态，无需查看电脑或清洗消毒器即可完全掌控剩余过程时间、报警与警告



Getinge ONLINE 可快速主动地排查故障，使运行更顺畅

Getinge 清洗剂系列


Getinge 集团在清洗剂和消毒剂开发领域有近 80 年的历史，已经形成了完整综合的产品系列以满足各种性能、效率和经济性的要求。我们提供的清洗剂和润滑剂系列在 Getinge 清洗消毒器中进行了全面测试和验证，最新的配方可以处理各种器械清洗问题，如预处理、生物膜的去除和复杂的微创器械的清洁等。



Getinge CLEAN 清洗剂系列

Getinge 清洗剂管理系统 (CMS)

我们的集中供液系统可以连接清洗消毒器、超声清洗机和手工清洗站，确保所有点位都有准确及时的液体供应。

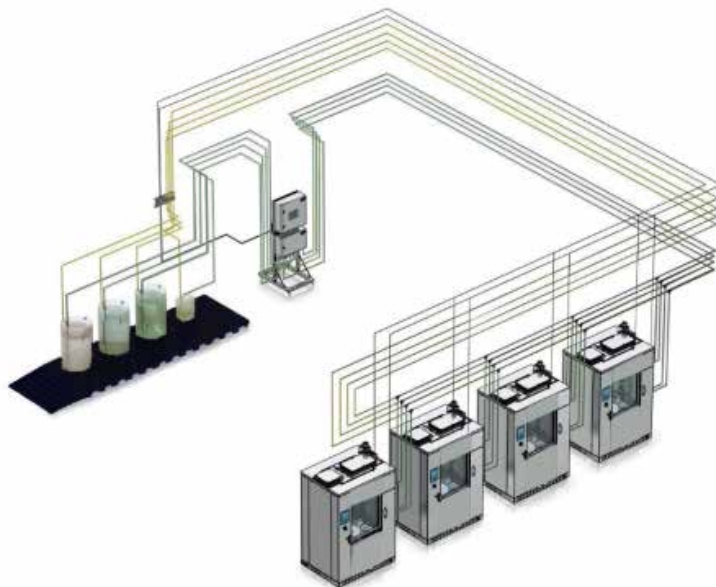

Getinge 清洗效果监测

规范定期使用洁定清洗效果监测产品可以为您提供一个独立验证方式以证明清洗过程效果的稳定和一致性。




灵活的装载设备

我们提供多种专用清洗架，适用于不同容量和器械类型的需求。清洗层架也可根据需要组合搭配。



装载配置示例

信赖我们，助您安心

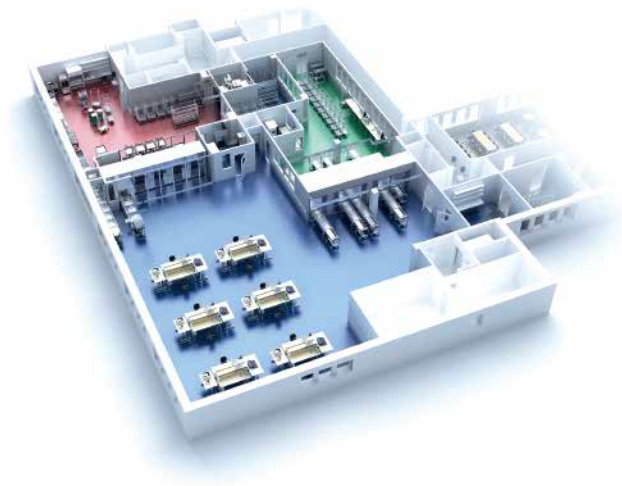

Getinge CSSD 设计规划服务

如果您正在规划新的消毒供应中心或希望在现有设施中实现更顺畅的流程，您可联系 Getinge。凭借在不同应用领域积累的丰富经验，我们的专家可从各方面为您提供详细建议，小到清洗消毒器的适宜安装位置、大到整个部门的效率提高和总购成本降低。我们相信，在优化您的消毒供应中心和区域的设计方面，我们的知识将发挥积极的作用。

Getinge 学院

始终保持了解新规范、标准和质量保证是需要时间和精力。我们可在您和您的员工需要时准确提供所需的知识，从而节省您的时间和精力。定制课程是我们的核心产品之一，我们通过 Getinge 学院这一独特平台提供此服务。



Getinge CARE – 多级服务承诺

优化服务通常可在提高生产率和降低成本。Getinge CARE 服务包将确保设备保持卓越性能，并尽可能延长设备使用寿命。经 Getinge 认证的专家，加上我们的各种智能服务，可提高正常运行时间，有效降低总成本，从而实现成功运营。三种不同标准的服务包（金牌、白金和钻石）均可根据您的特定需求，为您量身定制理想的解决方案。

有关 Getinge 服务和支持的更多信息，请与当地的 Getinge 代表联系。



外形尺寸
尺寸 mm

宽 1110 mm

深 910 mm

高 1870 mm

满足国内标准:

YY/T 0734.1-2018 (Mod ISO 15883-1:2006+A1 2014)

YY/T 0734.2-2018 (MOD ISO 15883-2:2006)

GETINGE 洁定

秉承所有人员和团体都应获得优质医疗服务的坚定理念，Getinge 致力于为医院和生命科学机构提供各种产品和解决方案，旨在改善临床效果并优化相关工作流程。我们提供的产品和解决方案涉及重症监护、心血管手术、手术室、无菌再处理和生命科学等领域。

此类信息仅供专业医疗人士或其他专业受众参考。信息并未详尽，不可取代使用说明、服务手册或医疗建议。

对于任何一方基于本材料的作为或不作为，Getinge 均不承担任何责任或义务。依赖此类信息的使用风险完全由用户个人承担。

所提及的疗法、解决方案或产品可能在您的国家无法使用或被禁止使用。未经 Getinge 书面许可，不得复制或全部或部分信息。

© 2024 Getinge 和 [Getinge 标志] GETINGE  为 Getinge AB 及其子公司或附属公司的商标或注册商标 [Novito 8666 Brochure ENG NA.CN.Rev1] | 版权所有

迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司
迈柯唯（上海）医疗设备有限公司
上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO 20 层
邮编：201103
联系电话：021-61973999