



# Centrale lessivielle Getinge

Systeme de dosage central

# Centrale lessivielle Getinge (CMS)

– un processus optimisé,  
une solution unique

Le système de dosage central de Getinge permet un nettoyage sans problème vous épargnant du temps et de l'argent.

Caractérisé par sa conception ergonomique, ses aspects de sécurité pour l'utilisateur et sa productivité, la centrale lessivielle Getinge (CMS) est un outil indispensable pour votre équipe. Elle permet de supprimer le chargement manuel et fréquent de chaque laveur-désinfecteur avec de petits bidons en répondant aux besoins en détergent de votre service par le biais d'un seul grand fût pour chaque type de détergent. La centrale lessivielle Getinge CMS est un système central de dosage qui peut être raccordé à des laveurs-désinfecteurs, nettoyeurs à ultrasons et stations de lavage manuel afin de maintenir le niveau de détergent dans les appareils utilisés dans le service. Le système offre une méthode précise de contrôle et de mesure de la quantité de détergent utilisée dans votre service.

Hautement flexible, la centrale lessivielle Getinge CMS peut être configurée sur mesure pour répondre aux besoins de chaque service. Elle peut également assurer une surveillance en ligne de l'état, des alertes et du fonctionnement de l'appareil.

Il existe une vaste gamme d'accessoires disponibles. La centrale lessivielle Getinge CMS a été mise au point, testée et validée sur la base de la gamme de détergents Getinge Clean afin de maximiser le niveau de sécurité et les temps de disponibilité. Elle est également facile à installer, minimisant ainsi les temps d'arrêt au sein de services à forte activité.

Depuis plus de 100 ans, Getinge propose des traitements hautes performances et des produits garantissant la stérilité qui répondent toujours aux normes du secteur les plus exigeantes et dont la fiabilité éprouvée permet d'offrir un résultat constant. En tant que fournisseur de solutions complètes, prêtes à être utilisées, vous pouvez compter sur Getinge pour vous fournir les produits dont vous avez besoin pour une propreté garantie.

Vous nous faites part du problème, nous apportons la solution.



La centrale lessivienne Geringe CMS a été développée avec la gamme de détergents Geringe Clean afin de répondre aux normes EN ISO 15883 relatives à l'efficacité de nettoyage des produits communément utilisés dans les services de stérilisation centralisées pour protéger les utilisateurs et les patients.

# Getinge CMS

— fait tout le travail pour vous

La centrale lessivienne Getinge CMS veille à ce que les laveurs-désinfecteurs et les réservoirs journaliers de tout autre équipement connecté soient remplis au niveau maximal. Des réservoirs journaliers scellés et hygiéniques sont utilisés comme réservoir tampon entre les fûts de détergent délocalisés et l'équipement connecté. Chaque réservoir journalier est également équipé de trois détecteurs de niveau pour maintenir le niveau approprié de détergent de sorte que votre personnel n'a pas à se préoccuper du contrôle des niveaux de détergent ou du manque de détergent dans les réservoirs. Les laveurs-désinfecteurs utilisent leur propre système de dosage standard à l'aide de sondes d'aspiration, pompes de détergent et débitmètres. Ceci simplifie la mise en œuvre, car le processus de validation du laveur-désinfecteur n'est pas affecté.

La centrale lessivienne Getinge CMS est un système fiable, équipé d'un grand écran tactile couleur et convivial pour surveiller tous les paramètres indispensables et afficher les alertes, si besoin est. La surveillance à distance est également possible via Getinge Online par le biais d'Internet ; il est ainsi possible de consulter l'état et les rapports sur l'équipement Getinge dans le monde entier. Tous les renseignements transférés via Internet sont cryptés et authentifiés et votre équipement est relié à notre centre de données sécurisé via votre connexion Internet existante.

## Système automatique de circulation du détergent


La centrale lessivienne Getinge CMS intègre un système automatique de circulation du détergent. Cela signifie que chaque détergent est délivré à tous les laveurs via une seule pompe de détergent.


La centrale lessivienne Getinge CMS peut exécuter plusieurs tâches à la fois. De plus, le système de circulation sera automatiquement activé si le système reste en mode veille au-delà de la durée prédéfinie. Ceci réduit le risque de cristallisation du détergent dans les conduites si l'équipement reste inutilisé pendant une période donnée.

Une soupape d'arrêt automatique est montée sur la conduite de retour vers les fûts de détergent principaux. Elle se ferme automatiquement lorsqu'un réservoir journalier signale qu'il faut davantage de détergent, afin de prévenir l'apparition de toute pression statique dans le système pendant une pause.

Si la durée de remplissage du réservoir journalier est plus longue que la durée prédéfinie, le système générera une alarme pour indiquer une pression ou un débit insuffisant ou une fuite. Ceci prévient tout fonctionnement du système avec un débit de détergent incorrect.

Getinge Online permet de surveiller et de contrôler à distance les paramètres du système, comme les notifications transmises par courriel et/ou SMS sur le téléphone portable ou l'ordinateur du client lorsque Getinge CMS atteint un niveau de commande ou déclenche une alarme d'avertissement avant que les niveaux n'atteignent un point critique.

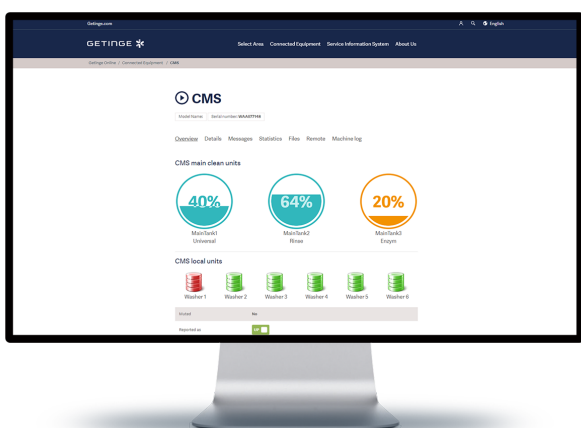

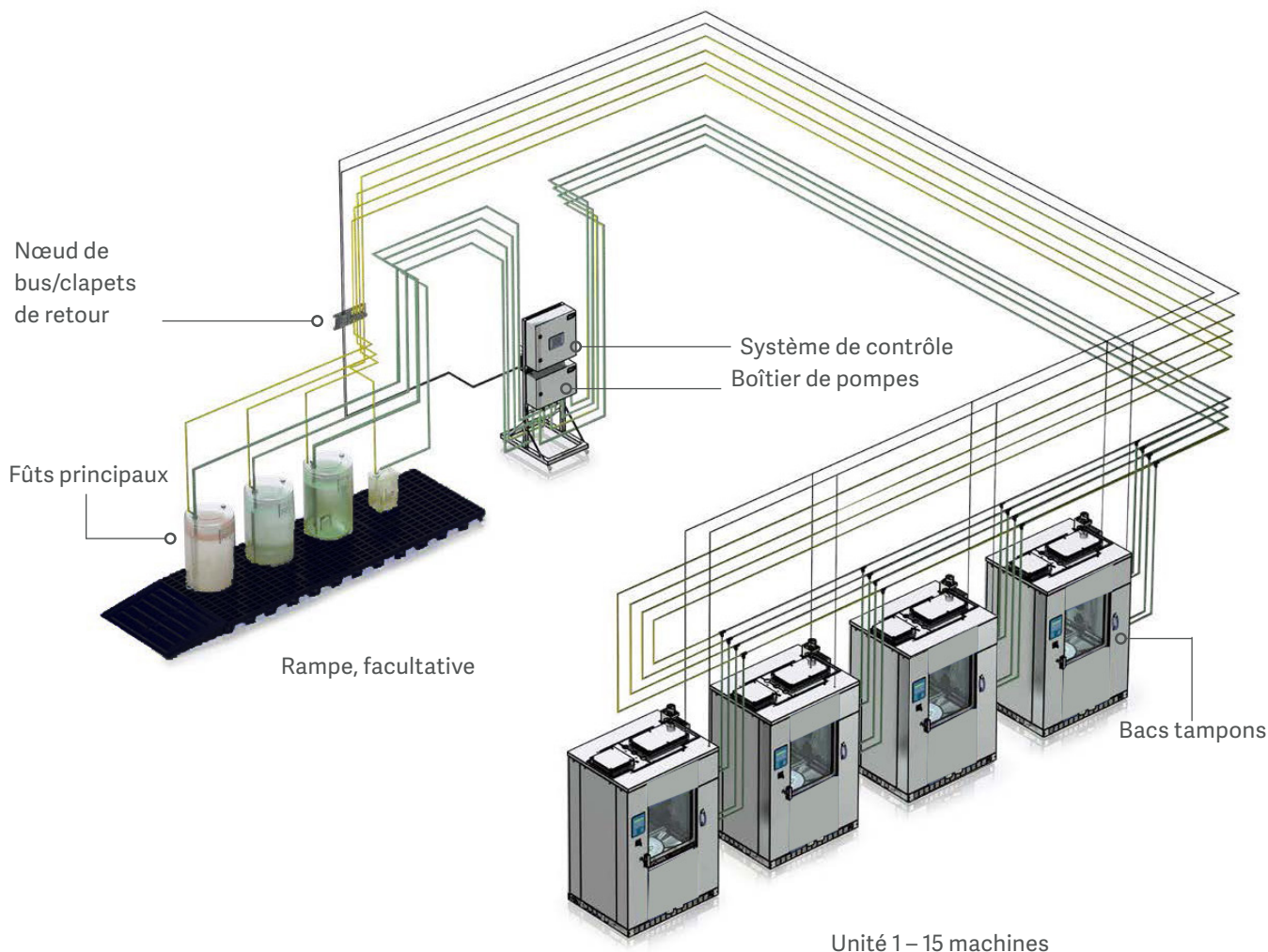

### Aperçu de la centrale lessivienne Getinge

Tour d'éclairage dotée de 4 LED pour visualiser et contrôler à distance l'indication d'alarme et d'état. Peut être installée à côté de la centrale lessivienne ou à l'endroit de votre préférence dans le service de stérilisation centralisée, afin de réduire le risque d'un niveau de détergent insuffisant pour les équipements.



- Système flexible pouvant prendre en charge jusqu'à 15 appareils utilisant chacun 4 détergents différents
- Système totalement indépendant - validation supplémentaire des laveurs-désinfecteurs non requise
- Conception ergonomique et sécurité de l'utilisateur
- Disponibilité élevée
- Affichage de la surveillance totalement automatique
- Pré-configuré pour les bidons de la gamme de produits Getinge Clean ; installation et contrôle du niveau aisés
- Écran tactile couleur convivial offrant une interface d'utilisation simple.

# Caractéristiques techniques

## Accessoires flexibles

Un large éventail d'accessoires est disponible pour divers scénarios d'installation. Et notamment des kits de montage mural ou au sol, des soupapes d'arrêt, des kits d'installation et la gamme de détergents Getinge Clean. Il est possible d'adapter la centrale lessivielle Getinge CMS à de nombreux types d'installation et configuration.

## Poids

Total	95 kg avec système électrique, armoire de pompe et support de montage
Armoire électrique	30 kg
Boîtier de pompes	22 kg
Support de montage sur roues	43 kg

## Dimensions

Armoire électrique		Boîtier de pompes	
Largeur	600 mm	Largeur	600 mm
Profondeur	210 mm	Profondeur	210 mm
Hauteur	600 mm	Hauteur	400 mm

Système de conduites/flexibles

Longueur des conduites/flexibles max. de 100 m (y compris 6 m max. à la verticale).



# Consommables Getinge

Sécurisez le retraitement de vos instruments  
– Le cycle de la vie

## Produits de nettoyage Getinge

### Un nettoyage efficace est un processus en plusieurs étapes

Depuis de nombreuses années, nos produits de nettoyage Getinge Clean visent à offrir une performance maximale ainsi qu'une efficacité et une rentabilité optimales.

La gamme de détergents et de produits d'entretien pour le nettoyage d'instruments comprend des formules conçues pour relever les défis les plus délicats du nettoyage des instruments.



## Indicateurs Getinge Assured



### Assurer des résultats fiables et reproductibles

L'usage quotidien de nos produits Getinge Assured Wash Monitoring vous permet de vous assurer de manière autonome que le processus de nettoyage est efficace et homogène.

Nous proposons une large gamme de tests de résidus protéiques destinés aux surfaces et aux instruments et ce, également pour les corps creux et les endoscopes.

## Mentions légales

Getinge Chamber Foam - Mousse nettoyante pour l'élimination du tartre et des dépôts minéraux présents sur les surfaces intérieures en acier inoxydable d'autoclaves et de cuves de laveurs automatiques.

Getinge Enzymatic Detergent - GetingeEnzymatic Plus - Détergent enzymatique neutre destiné aux laveurs désinfecteurs, aux bains à ultrasons et au nettoyage manuel.

Getinge Heavy Soil - Détergent fortement alcalin destiné aux laveurs désinfecteurs.

Getinge Instrument Lubricant - Lubrifiant pour dispositifs médicaux sans silicone destiné à l'usage des laveurs désinfecteurs.

Getinge Instrument Lubricant Plus - Lubrifiant à base d'eau, sans silicone ni huile minérale, pour une application après nettoyage afin de lubrifier les charnières et les pièces mobiles des instruments.

Getinge Neutralizer - Agent de neutralisation de résidus alcalins pour les laveurs désinfecteurs et détergent acide pour les instruments médicaux.

Getinge Neutralizer Plus - Agent de neutralisation et détergent acide pour l'élimination de la rouille et du tartre.

Getinge Pre Treatment Foam - Mousse de prétraitement pour préserver l'humidité de la souillure sur les dispositifs médicaux.

Getinge Rinse Aid - Produit de rinçage pour les laveurs désinfecteurs.

Getinge Universal Detergent - Détergent alcalin doux destiné aux laveurs désinfecteurs, aux bains à ultrasons et au nettoyage manuel.

Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par Quadralene Limited, Royaume-Uni.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation spécifique à chacun des produits

PUB-2022-0358-B, version de janvier 2024



Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et des sciences de la vie des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. Notre gamme de produits et de solutions est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de retraitement stérile et des sciences de la vie. Getinge compte plus de 10 000 employés dans le monde et ses produits sont commercialisés dans plus de 135 pays.

**Getinge Infection Control AB** • PO Box 69 • SE-305 05 Getinge • Suède • +46 10 335 00 00 • [info@getinge.com](mailto:info@getinge.com)

**Getinge France**, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · [accueil.FRARD@getinge.com](mailto:accueil.FRARD@getinge.com)

[www.getinge.fr](http://www.getinge.fr)