



Table d'opération mobile Maquet Lyra

Une table polyvalente pour de
nombreuses utilisations



GETINGE ✦

GETINGE

Polyvalence pour les procédures

Stabilité et convivialité d'utilisation

La table d'opération mobile Maquet Lyra a été conçue dans le but de vous procurer la stabilité et la fonctionnalité dont vous avez besoin dans un grand nombre de disciplines chirurgicales.

Le coût des soins de santé monte en flèche partout dans le monde. C'est pourquoi Getinge a développé la table d'opération mobile Maquet Lyra. Cette table vise à répondre aux besoins de la plupart des disciplines chirurgicales et elle est compatible avec les accessoires en fibre de carbone pour des diagnostics peropératoires.


L'ADN de Getinge repose sur une véritable compassion pour la santé, la sécurité et le bien-être des patients.

Fondée en 1904, mais avec des racines remontant à 1838, Getinge s'est développée progressivement et, par le biais d'acquisitions, est devenue un leader majeur du marché mondial. Nous proposons des solutions et un accompagnement tout au long du parcours clinique grâce à une gamme réunissant plusieurs marques réputées et fiables, notamment les tables d'opération Maquet auxquelles vous faites confiance depuis plus de 180 ans.



La compatibilité à moindre coût

Répondre aux besoins des chirurgiens

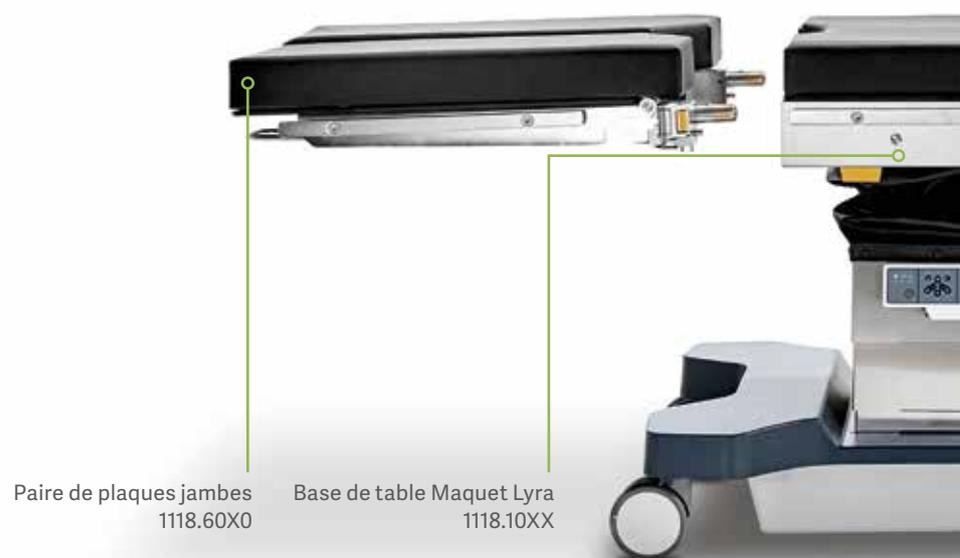

Charge totale maximale

La table d'opération mobile Maquet Lyra possède une conception robuste visant à assurer stabilité et sécurité pour un large éventail de patients. Sa charge maximale est de 360 kg en position normale et 180 kg sans aucune restriction.



Conçue pour une utilisation universelle

Une table mobile flexible peut servir à plusieurs fins. Le déplacement longitudinal manuel facilite les diagnostics et le traitement peropératoires. Il vise à offrir un meilleur accès pour le chirurgien tout en améliorant simultanément l'accessibilité de l'amplificateur de brillance. L'imagerie à 360° est possible lorsqu'elle est associée à des accessoires en fibre de carbone.

La table d'opération mobile Maquet Lyra est conçue pour convenir à presque toutes les disciplines chirurgicales, augmentant ainsi les options pour chaque salle d'opération. De plus, elle est compatible avec tous les accessoires de table d'opération mobiles Getinge que vous possédez peut-être déjà, ce qui maximise votre retour sur investissement.



Angles, inclinaisons et hauteurs polyvalents

Une plage de hauteur de 350 mm autorise toute une gamme d'interventions, que le chirurgien soit assis ou debout. Cela améliore l'ergonomie, visant ainsi à réduire la fatigue et minimiser le risque de blessure. De nombreux angles et inclinaisons peuvent être combinés pour donner aux chirurgiens un bon accès au champ opératoire. Cela peut améliorer les résultats et réduire la durée de rétablissement.



Amélioration de la cadence entre les procédures

Les plaques de jambes assistées par vérin à gaz peuvent se replier autour de la colonne et rester fixées pendant les interventions gynécologiques. Cela a été conçu dans le but de réduire le temps de reconfiguration et de permettre d'augmenter la cadence.

Vers l'amélioration du confort

Pour le personnel et les patients



Plage de hauteur de 600 mm à 950 mm

De bonnes conditions ergonomiques sont importantes pour maintenir les équipes satisfaites et en bonne santé. Une bonne ergonomie réduit non seulement le risque de blessure professionnelle, mais minimise également la fatigue qui peut mener à des erreurs cliniques. La table Maquet Lyra possède une plage de hauteur de 350 mm pour répondre aux besoins ergonomiques.

Accès clinique

La base concave et la conception de la colonne et du plateau visent à permettre à l'équipe chirurgicale de s'approcher du patient sans fatigue positionnelle. L'équipe peut ainsi travailler dans un environnement confortable.

Maniable

La table d'opération mobile Maquet Lyra est montée sur quatre roulettes pivotantes doubles visant à faciliter la manœuvre en ligne droite ou latérale. La table est ainsi facile à transporter et à positionner.

La table d'opération mobile Maquet Lyra comprend un certain nombre de caractéristiques conçues dans le but d'assurer la sécurité et le confort des patients et des équipes.



Technologie de sécurité par défaut

Même dans le cas peu probable d'une panne du logiciel de table, la table peut être commandée sans danger. Le panneau de commande de secours est câblé à un circuit séparé, sans logiciel entre les deux.

Moins de composants électriques*

La table Maquet Lyra comporte moins de composants électriques, ce qui simplifie l'entretien pour une utilisation à long terme et à moindre coût.

Batteries spécialement conçues

Les batteries sont de longue durée. Une seule recharge dure environ une semaine.

*Par rapport à l'ancienne génération de tables mobiles Maquet

En matière de sécurité,
il n'y a pas de droit
à l'erreur.
La table d'opération
mobile Maquet Lyra
comporte des dispositifs
de sécurité intégrés
visant à prévenir
les accidents
ou les blessures.

Possibilités de positionnement

Une table flexible peut améliorer la fonctionnalité de votre salle d'opération et en réduire les coûts.



Position goitre



Traitement du tibia



Chirurgie de la colonne vertébrale en position couchée avec accès optimal pour l'amplificateur de brillance.



Position « park bench »

Maquet Lyra offre plusieurs possibilités de positionnement du patient en proposant un positionnement normal ou inversé ainsi qu'une large gamme de combinaisons d'angles et d'inclinaisons latérales. Un bon accès est donc possible pour diverses positions chirurgicales.

Le déplacement longitudinal manuel vise à améliorer les diagnostics peropératoires et le traitement. Il vise à offrir à la fois un meilleur accès pour le chirurgien et améliore simultanément l'accessibilité de l'amplificateur de brillance. L'imagerie à 360° est possible lorsqu'elle est associée à des accessoires en fibre de carbone.



Position génu-pectorale



Opération de l'épaule en position semi-assise



Chirurgie urologique et gynécologique



Interventions au niveau des reins

Description technique


et équipements spécifiques

Caractéristiques générales de fabrication

- Socle stable avec quatre roulettes pivotantes doubles pour faciliter les mouvements et les manœuvres (le socle peut être verrouillé par une pédale)
- Revêtement du socle en SMC (composite de moulage en feuille)
- Le panneau de commande de secours est connecté à un circuit séparé afin de garantir que la table peut être contrôlée, même en cas de panne du logiciel de la table
- Interfaces identiques pour le côté normal et arrière

Caractéristiques électriques

- Accumulateurs spécialement conçus ; une seule charge tenant environ une semaine dans le bloc opératoire
- Contrôle de la charge électronique, avec indicateurs visuels
- Accumulateurs rechargés sur secteur
- 100–240 V CA (ajustable), 50–60 Hz, par câble secteur
- Classe de sécurité II, type B ; le courant de fuite du coffret satisfait aux exigences du courant de fuite du patient dans des conditions de type B conformément à la norme EN 60601-1

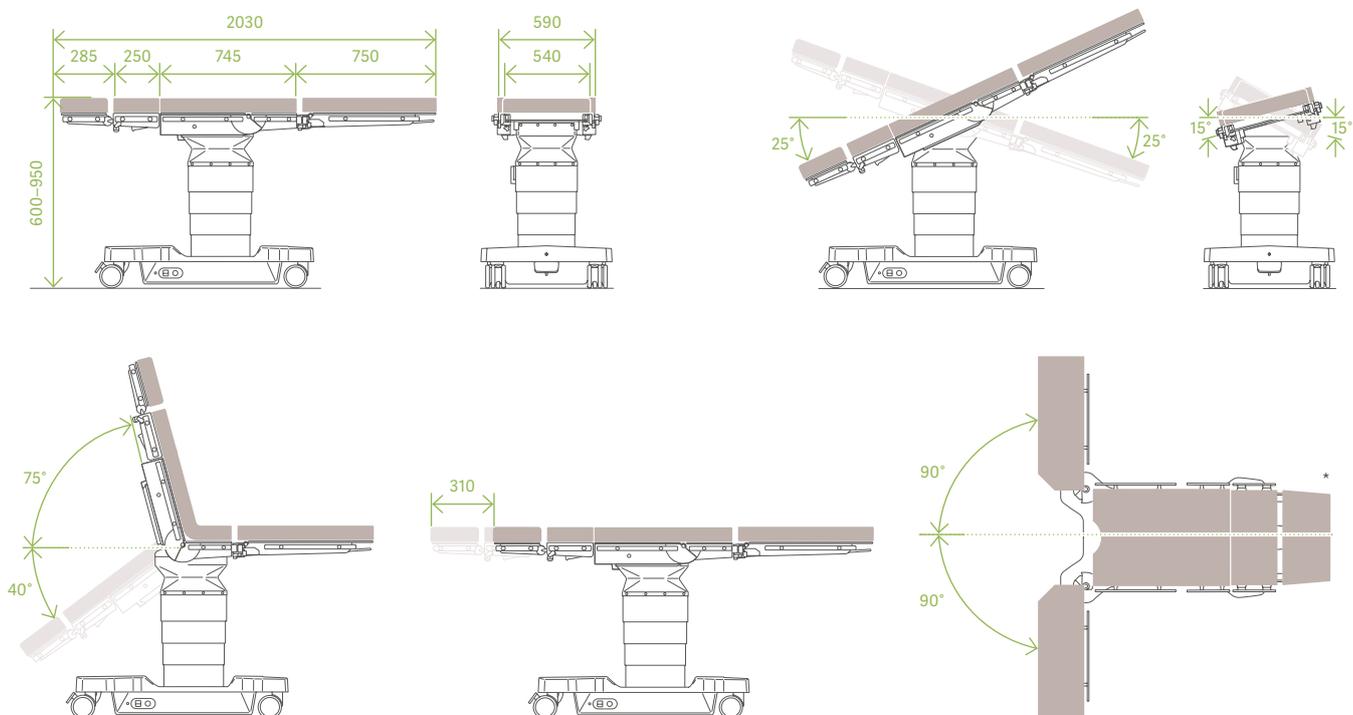

Toutes les dimensions sont en millimètres
* Réglage de la table possible en association avec la plaque de jambes 1118.60X0

Caractéristiques techniques

Maquet Lyra 1118.10XX	
Longueur du plateau de positionnement de la table d'opération avec plaque dorsale, tête et plaque jambière standard	2030 mm
Longueur du plateau de positionnement de la table d'opération sans les accessoires	745 mm
Largeur sans rails latéraux	540 mm
Largeur avec rails latéraux	590 mm
Poids net (sans accessoires)	190 kg
Charge totale max. (patient et accessoires)	360 kg avec restrictions 180 kg sans restrictions

Plage de réglage

Maquet Lyra 1118.10XX	
Hauteur sans matelas	600–950 mm
Position de Trendelenburg/Trendelenburg inversée	25° / 25°
Inclinaison transversale	15°
Plaque dorsale inférieure	+75° / -40°
Plaque jambière (manuelle)	-90° (bas)*
Déplacement longitudinal manuel	310 mm
Mécanisme de freinage de base (Lock/Unlock)	

* Réglage de la table possible en association avec la plaque de jambes 1118.60X0

Mentions légales

Table d'opération mobile Maquet Lyra - Table d'opération mobile destinée à positionner le patient en vue d'une intervention chirurgicale juste avant, pendant et après la phase opératoire ainsi que pour l'examen et le traitement.

Paire de plaques jambières (1118.60X0) - Dispositif destiné au positionnement des jambes d'un patient juste avant, pendant et après l'intervention chirurgicale, ainsi que pour l'examen et le traitement, sur une table d'opération.

Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par MAQUET (Suzhou) Co., Ltd, Chine.

Plaque de rallonge (1131.31XC) - Dispositif destiné à rallonger les plateaux juste avant et après l'intervention chirurgicale, ainsi que pour l'examen et le traitement, sur une table d'opération.

Rallonge de plaque de siège (1131.55XX) - Dispositif destiné à l'allongement de la surface de positionnement d'un patient juste avant, pendant et après l'intervention chirurgicale, ainsi que pour l'examen et le traitement, sur une table d'opération.

Tête (1130.53X0) - Dispositif destiné au positionnement de la tête d'un patient juste avant, pendant et après l'intervention chirurgicale, ainsi que pour l'examen et le traitement, sur une table d'opération.

Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par MAQUET GmbH, Allemagne.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation spécifique à chacun des produits.

PUB-2020-0054-B, version de décembre 2023.

GETINGE 

Convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de stérilisation centrale et des sciences de la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.

Fabricant : Maquet (Suzhou) Co., Ltd. · No.158 Fangzhou Road · Suzhou Industrial Park · 215024 Suzhou · China · +86 (0) 512 62839880

Trouvez votre représentant commercial :

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr