



Bewährte Technologie, zuverlässige Leistung

Getinge 46-4 Reinigungs-
und Desinfektionsgerät



Zuverlässige Leistung

Wählen Sie das Reinigungs- und Desinfektionsgerät, dem die ganze Welt vertraut

Bei der Patientenversorgung können Ausfallzeiten gefährlich sein. Ein zuverlässiges Reinigungs- und Desinfektionsgerät sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage und schützt die Patienten vor Kreuzkontaminationen.

Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Getinge 46-Serie haben sich in Krankenhäusern weltweit bewährt. Sie bieten eine hohe Verfügbarkeit und Kundenzufriedenheit. Diese Reinigungs- und Desinfektionsgeräte verarbeiten alle Arten von wieder verwendbaren Utensilien – von komplizierten Instrumenten bis hin zu Stationsutensilien – mit einem Intensiv-Waschprogramm für stark verschmutzte Instrumente.

Das Modell 46-4 verfügt jetzt über eine optimierte Konfiguration für Krankenhausabteilungen, Stationen, Desinfektionsräume oder Kliniken, die von den Vorteilen einer einzelnen Klapptür profitieren können. Für den Betrieb oder die Wartung des Geräts sind keine Transportwagen erforderlich.

Das Modell 46-4 verfügt über drei feste Sprüharme in der Kammer und kann ein breites Spektrum an Beladungen im unteren Basis- und oberen Reinigungswagen aufnehmen, die auf Führungsschienen laufen.

Der untere Basis-Reinigungswagen ist für die Verwendung mit dem MIC-Zubehör der 46-Serie geeignet, um eine effiziente Reinigung von Lumen-Instrumenten zu ermöglichen.

An Ihre Anforderungen anpassbar

Ein Modell für jede Abteilung

Die Einzeltürkonfiguration des 46-4 bietet eine gut geeignete Einheit für Stationen, Desinfektionsräume, Kliniken oder andere Einrichtungen, die ein zuverlässiges Reinigungsgerät mit hoher Kapazität bei kleinen Bodenmaßen erfordern.

Hohe Reinigungskapazität

Das Einzeltürmodell des 46-4 bietet eine große Kammer und ein verschließbares Reinigungsmittelfach mit Platz für bis zu vier 5-Liter-Reinigungsmittelbehälter – dies alles auf bemerkenswert kompaktem Raum.

Effektive Trocknung mit niedrigem Geräuschpegel

Dank des großen, bürstenlosen Lüftermotors (kein Kohlenstoffstaub) mit niedriger Drehzahl und HEPA-Filter trocknet der 46-4 Güter sowohl innen als auch außen nahezu geräuschlos. Trockenzeit und Temperatur können außerdem für jedes Programm über das Bedienpaneel frei gewählt werden.

Leichte Bedienung

Auf dem Display wird jede Phase des Reinigungs- und Desinfektionsvorgangs in verständlicher Sprache beschrieben. Wählen Sie einfach eines der sechs voreingestellten Programme aus und drücken Sie die Starttaste.



Funktionelles Design

Das Design des Getinge 46-4 basiert auf Funktion und Zuverlässigkeit.

Design mit Liebe zum Detail

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät der Getinge 46-Serie beinhaltet eine Reihe von Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit für das Personal verbessern:


- **Effiziente Raumnutzung** – Eine Klapptür schafft Bodenfreiheit und verbessert gleichzeitig die ergonomische Positionierung des Reinigungswagens. Kein Transportwagen für den Betrieb oder die tägliche Wartung erforderlich.
- **Ergonomischer Griff** – Ein einfacher Griff erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür.
- **Leicht zu reinigende Oberflächen** – Minimieren Sie das Risiko von eingeschlossenem Schmutz und Krankheitserregern mit einer leicht abwischbaren glatten Oberfläche.
- **Wartungsfreundlich** – Die 46-Serie ist für die Wartung bequem von vorn zugänglich.



Flexible und kostengünstige Beladeausrüstung

Die Beladeausrüstung für den Getinge 46-4 schafft völlig neue Flexibilität. Die Reinigungswagen können problemlos an die individuellen Anforderungen angepasst werden und gewährleisten eine vollkommene Erfüllung der Bearbeitungsanforderungen. Sie können sie für viele verschiedene Zwecke einsetzen. Passen Sie sie einfach an Größe, Volumen oder Art der aktuell zu bearbeitenden Beladung an. Die Anpassung ist im Handumdrehen und ohne Hilfsmittel erledigt. Zubehör für die Reinigung von chirurgischen Instrumenten, MIC-Instrumenten, Anästhesieausrüstung, OP-Schuhen, Babyflaschen, Laborgläsern und vielem mehr ist erhältlich.

Die Flexibilität des Systems bedeutet keine zusätzlichen Reinigungswagen, was nicht nur Kosten, sondern auch Platz in der Einrichtung einspart. Wenn sich Ihre Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, können Sie Ihre Reinigungswagen ganz einfach durch zusätzliche MIC-Module ergänzen.

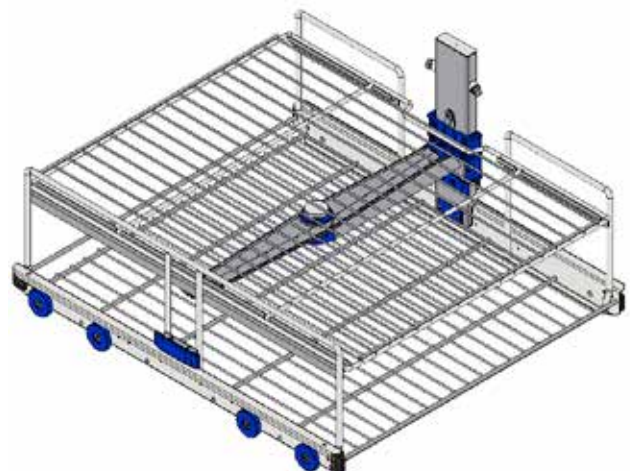

Ein Reinigungswagen mit zwei Ebenen sorgt für Flexibilität und besseren Zugang beim Laden der Instrumente. Beide Ebenen lassen sich für DIN-Siebe oder MIC-Module auf der unteren Ebene verwenden, wenn der Sprüharm und die obere Ablage entfernt werden.

Maximale Reinigung

Nachweisbare Leistung

Dokumentierter Sauberkeitsnachweis

Den bewährten Methoden Ihrer Gesundheitseinrichtung kommt im unentwegten Einsatz gegen Infektionen, die während Behandlungen und Krankenpflegemaßnahmen auftreten können, höchste Priorität zu. Die Möglichkeit, Sterilitätsdaten effizient zu dokumentieren und abzurufen, bietet Aufsichtsbehörden, Akkreditierungsorganisationen und einer immer besser informierten Öffentlichkeit diese Sicherheit.

Echtzeitdaten sind eine wertvolle Informationsquelle für Manager und Krankenhausverwalter, um Probleme schnell zu beheben, die Produktionsplanung zu verbessern und die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. Mit dem verschlüsselten Getinge Online Portal können Sie bei Bedarf sicher auf Reinigungsdaten zugreifen. Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Getinge 46-Serie lassen sich auch in T-DOC, unserer Lösung für steriles Versorgungsmanagement, integrieren.



Zuverlässige Leistung, unabhängige Überprüfung der Sauberkeit

Unsere Getinge Clean Chemistries bieten seit vielen Jahren maximale Leistung bei gleichzeitig effizienter und wirtschaftlicher Leistung.

Das umfangreiche Sortiment an Reinigungsmitteln und Pflegeprodukten für Instrumente umfasst modernste Formulierungen zur Bewältigung höchster Anforderungen bei der Instrumentenreinigung: Vorbehandlung, komplexe minimalinvasive Instrumente, Prionen (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) und Biofilme.

Mit unserem zentralen Dosiersystem, dem Getinge Clean Management System (CMS), können Sie sicher sein, dass Sie in Ihren Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Ultraschall-Reinigungsgeräten und manuellen Reinigungsstationen die richtige Menge an Reinigungsmitteln verwenden.

Der routinemäßige Einsatz unserer Getinge Assured-Produkte zur Reinigungskontrolle bietet Ihnen den unabhängigen Nachweis, ob der Reinigungsprozess konstant und effektiv abläuft. Wir bieten ein breites Spektrum an Tests auf Proteinrückstände für Oberflächen und Instrumente an, auch für Instrumente mit Hohlräumen.



Ihrer Herausforderung gewachsen

Das Getinge 46-4 Reinigungs- und Desinfektionsgerät in einer klassischen Einzeltürkonfiguration mit Basis-Reinigungswagen und oberen Führungsschienen***

	Einheiten	46-4
Gesamtabmessungen		
Breite	mm / in	650 / 25,6
Tiefe	mm / in	690 / 27,2
Höhe (mit und ohne Trockner)	mm / in	1.860 / 73,2
Abmessungen innen		
Reinigungsebenen (bis zu)	Stück	3
Kammervolumen (brutto)	L / cu ft	280 / 9,88
Kammervolumen (effektiv)	L / cu ft	201 / 7,1
Kammerbreite (effektiv)	mm / in	550 / 21,65
Kammertiefe (effektiv)	mm / in	620 / 24,4
Kammerhöhe (effektiv)	mm / in	590 / 23,22
DIN 1/1* Siebe/Beladung	Stück	6
SPRI I** Siebe/Beladung	Stück	6



* = DIN 1/1 = 480 x 250 x 50 mm

** = SPRI I = 450 x 340 x 70 mm

*** = Unterer Basis-Reinigungswagen (1 oder 2 Ebenen) in Kombination mit einem oberen Reinigungswagen auf Führungsschienen. Beide ausziehbar für einfaches Be- und Entladen.



Wir bei Getinge sind davon überzeugt, dass jede Person und Gesellschaft Zugang zur bestmöglichen Versorgung haben sollte. Daher bieten wir Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen Produkte und Lösungen an, mit denen sich klinische Ergebnisse verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren lassen. Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivmedizin, kardiovaskuläre Eingriffe, Operationssäle, Sterilgutaufbereitung und Life Science. Getinge beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Unsere Produkte werden in mehr als 135 Ländern verkauft.

Getinge Infection Control AB · PO Box 69 · SE-305 05 Getinge · Sweden · +46 10 335 00 00 · info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.com