

# Monitortragsystem Maquet Moduevo Screen

## Optimale Lösungen für die Bildgebung

In Hybrid-OPs spielt die Bildgebung eine immer wichtigere Rolle. Sie ermöglicht es, das Operationsfeld detailliert und hochauflösend darzustellen. Auch bei der minimal-invasiven Chirurgie ist die Bildgebung für eine exakte Führung und Navigation während des Eingriffs von hoher Bedeutung. Durch eine verbesserte Hand-Augen-Koordination wird die Präzision erhöht und gleichzeitig die Operationsdauer verkürzt.

Durch eine Vielzahl an möglichen Konfigurationen bietet Maquet Moduevo Screen optimale Lösungen in diesem Bereich. Maquet Moduevo Screen ist kompatibel mit Großmonitoren bis 60", sowie mit 4-6 kleineren Monitoren bis 32". Bild- und Videomaterial wie beispielsweise Röntgenbilder, endoskopische Bilder, Vitalparameter und Patientenakten kann somit flexibel verteilt und angezeigt werden.



### Vorteile von Maquet Moduevo Screen

- **Kollisionsschutzsystem STSB:** Das innovative Kollisionsschutzsystem SafeTy Bar und SafeTy Swing erhöht die Patientensicherheit und trägt zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs im OP bei.
- **Verbesserte Hygiene:** Geschlossenes Design und vollständig innenliegende Verkabelung.
- **Modularität:** Auf der Rückseite können ein oder zwei Backup-Monitore (bis 32") angebracht werden.
- **LED-Beleuchtungssystem:** Das optionale LED-Decken- und Bodenlicht kann über ein Bedienfeld auf der Rückseite von Maquet Moduevo Screen, sowie wandseitig gesteuert werden.

### • Vollständige Abdeckung des Arbeitsbereichs:


Der Monitortragarm kann innerhalb eines Arbeitsbereichs mit 5 m Durchmesser an jeder beliebigen Stelle positioniert werden.

### Wartung und Erweiterbarkeit

- **Einfacher Zugang:** Steckverbindungen und Netzteile sind einfach und servicefreundlich über die Rückseite von Maquet Moduevo Screen zugänglich. Auch der nachträgliche Einzug von beispielsweise Videoleitungen gestaltet sich als sehr einfach.
- **EPOs-Zubehörschiene:** Zubehörkomponenten können je nach Bedarf schnell und einfach angebracht oder entfernt werden.



Die rückseitige EPoS-Zubehörschiene ermöglicht die Anbringung von Zubehörkomponenten, wie zum Beispiel eine Aufnahme für einen oder zwei Backup-Monitore.

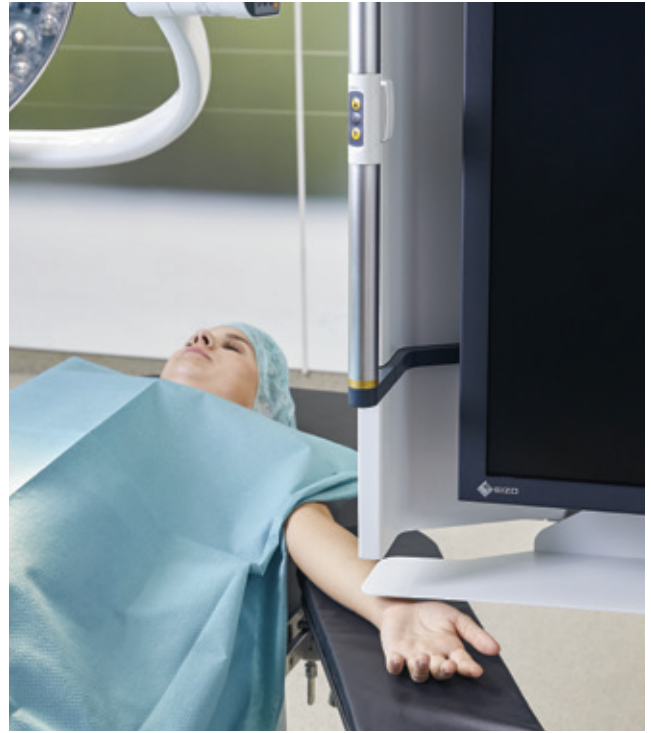

SafeTy Bar – ein sensorgesteuertes Kollisionsschutzsystem – verringert das Risiko, den Patienten einzuklemmen.



Maquet Moduevo Screen S

Maquet Moduevo Screen M

Maquet Moduevo Screen L

Maquet Moduevo Energy  
(1 Ausleger 600, 900, 1.200  
+ 1 Motorarm 1.000 mm)



Maquet Moduevo Spring  
(1 Ausleger 600, 900, 1.200  
und 1.500 mm + 1 Federarm  
1.000 mm)



Kompatible  
Monitorgrößen/-anzahl

1 Monitor bis 60"  
4 Monitore bis 27"

4 Monitore bis 32"

6 Monitore bis 24"

Maquet (Suzhou) Co., Ltd . No.158 Fangzhou Road . Suzhou Industrial Parl .  
215024 Suzhou . China . +86 (0) 512 62839880

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Wilerstrasse 75 • 9200 Gossau • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch

[www.getinge.de](http://www.getinge.de)

