

The Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter is the single site, kink resistant, veno-venous device designed to enable optimal extracorporeal life support.

販売名：AVALON ダブルルーメンカテーテル  
承認番号：23000BZX00033000  
クラス分類：IV

ご使用前に、必ず添付文書をお読みください。  
再滅菌・再使用は行わないでください。

**GETINGE** 

Getingeは、すべての人と地域社会が最善のケアを受け得ることを願い、病院やライフサイエンス関連施設に、臨床結果の向上と最適なワークフローの実現を適える製品・ソリューションを提供しています。その領域は、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理、ライフサイエンスといった多様な領域にわたります。  
Getingeは、世界で10,000人以上の従業員を擁し、製品・ソリューションは135か国以上の国で使用されています。

### ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

アキュート・ケア・セラピー事業部  
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲  
TEL：03-5463-8316  
第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X00176

[www.getinge.com/jp](http://www.getinge.com/jp)

MCV-022-04

仕様は予告なく変更することがあります



# Avalon Elite

Bi-Caval Dual Lumen Catheter

# The percutaneous kink resistant dual lumen catheter for extracorporeal life support.

キンク防止機能を備えた、経皮挿入型ダブルルーメンカテーテルです。

## Avalon ダブルルーメンカテーテルの利点

- カテーテルは内頸静脈より挿入し、上大静脈と下大静脈より脱血、右心房へ送血して戻すことによって体の自然な血液の流れに適合させることができます。
- 幅広いサイズバリエーションにより、新生児、小児、成人患者への臨床応用が広がります。
- 耐久性に優れたポリウレタンと、柔軟性や生体適合性に優れたシリコンを組み合わせた独自の素材で構成しています。
- カテーテルの挿入、および留置を補助するため放射線不透過性を確保しています。



送血ポート部

## 特徴的なイントロデューサを採用

- 「指先状」のカテーテル先端補強材を使用することにより、イントロデューサとの接続を最適化しています。
- よりスムーズな経皮的挿入のため、イントロデューサ先端をテーパ形状に設計しています。
- 術者の好みに応じてイントロデューサのカテーテルからの先端長を調整可能です。




イントロデューサとカテーテル先端部

# Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheters


## Large family of sizes for broad clinical application.

幅広いサイズバリエーションにより、臨床応用が広がります。

フローチャート (13,16,19 Fr.)

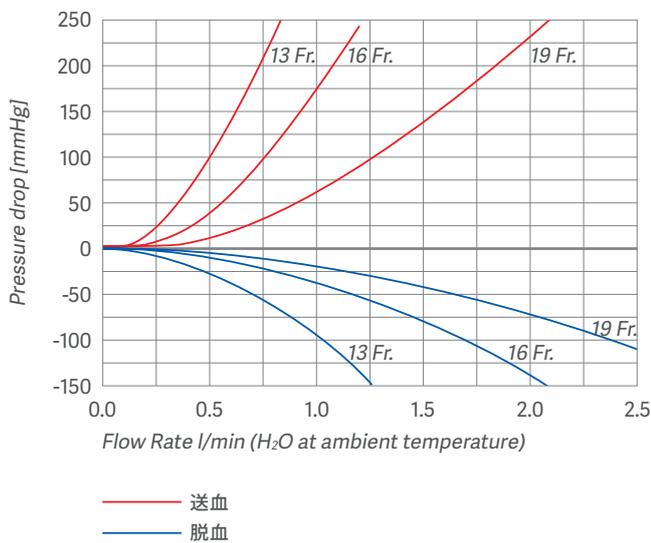

フローチャート (23,27,31 Fr.)

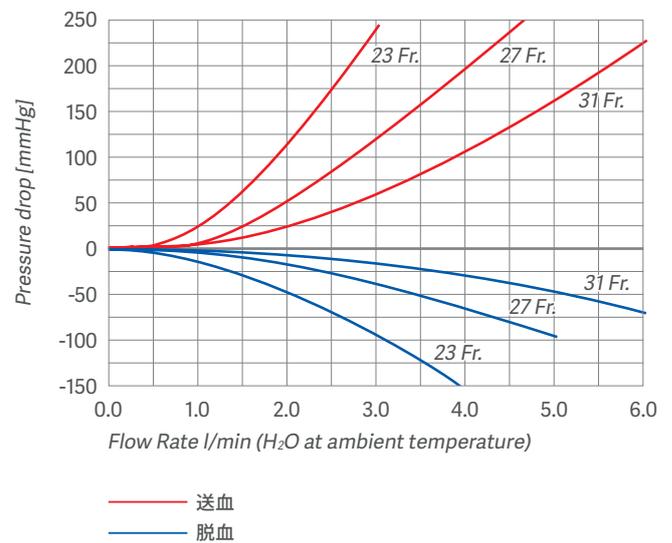

### Avalon ダブルルーメンカテーテル ラインアップ

製品番号	外径	挿入長	コネクタサイズ	注文単位
10013	13 Fr. (4.3mm)	11cm (4.3")	1/4"	1本/箱
10016	16 Fr. (5.3mm)	14cm (5.5")	1/4"	1本/箱
10019	19 Fr. (6.4mm)	21cm (8.3")	1/4"	1本/箱
10023	23 Fr. (7.7mm)	31cm (12.2")	3/8"	1本/箱
10027	27 Fr. (9.0mm)	31cm (12.2")	3/8"	1本/箱
10031	31 Fr. (10.3mm)	31cm (12.2")	3/8"	1本/箱