



Getinge SMART トロリー

人間工学的な器材の搬送

Getinge SMARTコンセプト

進化した利便性

人間工学的なコンセプト

積載と搬送システムは、手術室と滅菌供給部門のワークフローで重要な役割を担っています。Getinge SMARTトロリーは、人間工学と機能性の両面で器材の積載と積降及び搬送を新しいレベルにするために慎重に設計されています。

このトロリーは、より高い衛生性と使いやすさを兼ね備え、効率的な器材積載・搬送ができる人間工学的概念に基づいて製造されています。Getinge SMARTトロリーは表面の素材の選択から操作性、清掃性および人間工学に至るまで細部にわたって高い機能を搭載したローディングトロリーです。

Getinge SMARTトロリーは、手動による器材の積載、積降を低減するセミオートマチックローディング機能を装備することが可能です。操作性向上により、日々の業務が快適になります。

パワードライブ機能は、使用者がほとんど力をかけることなく移動したい場所までトロリーを操作することが可能なオプションです。これらのオプション機能は人間工学性を良好にし、スタッフにより良い労働環境を与えます。



SMART ローディング、 アンローディングトロリー

人間工学を駆使したスマート設計

人間工学とは、人々が努力、ストレスまたは怪我など無く働くことが出来ることです。それはつまり、重量物の可搬性や人々が作業する高さや長さの違いを理解し、それらに柔軟に対応することです。

このローディング、アンローディングトロリーはSMART人間工学コンセプトの概念に基づいており、そのため、積載と搬送のあらゆる部分を網羅します。

SMART フィックスド ハイトトロリー

- ・簡便な操作性
- ・容易な清掃
- ・人間工学的
- ・「SMARTオプション」の装備されていないSMARTローディングトロリーはGetingeのカートウォッシャー・ディスインフェクターで洗浄、消毒することができます。
(HS33用トロリーを除く)



SMART オプション

■セミオートマチックローディング (SAL)

ハンドルに内蔵された操作パネルを使用して、自動的に滅菌器のラックを搬入・搬出するためのオプションです。

■SMART ハイアジャスタブルトロリー (AHT)

作業を行いやすい高さに調節が可能で多くの使用者の作業がより楽になります。

■パワードライブ (PD)

少しの力で、目的の場所までの移動を可能にし、使用者の作業がより楽になります。



※Getinge のカートウォッシャー・ディスインフェクターで洗浄消毒することができるタイプのトロリーもございます。

SMARTオプション付のトロリーは、ハンドルに操作パネルを集約しています。
そのため、ハンドルから手を離さずに安全な使用と移動が可能です。



SMART ローディング、 アンローディングトrolley 仕様

Getinge SMART ローディング、アンローディングトrolleyはあらゆる状況において使用者が必要とする様々な解決策の選択肢を提供します。

ラック用ローディングトrolley – Getinge HS33

滅菌器	商品コード	品名	最大積載量
HS33	564710370	HS33用トrolley	30 kg
HS33+	564710372	HS33+用トrolley	30 kg



シェルフラック用ローディングトrolley – Getinge 66, 67 フルレングスロードキャリア

滅菌器	商品コード	品名	最大積載量	積載可能長さ
HS 6606	6020720670	6606用専用台車	200 kg	640 mm
HS 6610, GSS6710	6020720672	6610/6710用専用台車	200 kg	990 mm
HS 6613, GSS6713	6020720674	6613/6713用専用台車	200 kg	1290 mm
HS 6617, GSS6717	6020720676	6617/6717用専用台車	200 kg	1680 mm



ハーフレングスロードキャリア (2つのロードキャリアを滅菌器に搬入)

滅菌器	商品コード	品名	最大積載量	積載可能長さ
HS 6613, GSS6713	6020720670	6613/6713用専用台車	200 kg	640 mm
HS 6620, GSS6720	6020720672	6610/6710用専用台車	200 kg	1290 mm



オプションフルレングスロードキャリア

オプション (下記)

滅菌器	商品コード	品名	最大積載量	積載可能長さ	AHT	SAL	PD
HS 6610 GSS6710	6020721472	6610/6710用専用台車 SAL	200 kg	990 mm		x	
HS 6613 GSS6713	6020721474	6613/6713用専用台車 SAL	200 kg	1290 mm		x	
HS 6610 GSS6710	6020723072	6610/6710用専用台車 高さ可変	200 kg	990 mm	x		
HS 6613 GSS6713	6020723074	6613/6713用専用台車 高さ可変	200 kg	1290 mm	x		
HS 6617 GSS6717	6020723076	6617/6717用専用台車 高さ可変	200 kg	1680 mm	x		
HS 6610 GSS6710	6020724072	6610/6710用専用台車 AHT SAL	200 kg	990 mm	x	x	
HS 6613 GSS6713	6020724074	6613/6713用専用台車 AHT SAL	200 kg	1290 mm	x	x	
HS 6610 GSS6710	6020724572	6610/6710用専用台車 AHT PD	200 kg	990 mm	x		x
HS 6613 GSS6713	6020724574	6613/6713用専用台車 AHT PD	200 kg	1290 mm	x		x
HS 6610 GSS6710	6020725072	6610/6710用専用台車 AHT SAL PD	200 kg	990 mm	x	x	x
HS 6613 GSS6713	6020725074	6613/6713用専用台車 AHT SAL PD	200 kg	1290 mm	x	x	x

* コンテナ、シェルフラック、バスケットフィーダーは別途購入が必要です。

オプション ハーフレングスロードキャリア (2つのロードキャリアを滅菌器に搬入)

オプション (下記)

滅菌器	商品コード	商品名	最大積載量	積載可能長さ	AHT	SAL	PD
HS 6617, GSS6717	6020723072	6610/6710用専用台車 高さ可変	200 kg	840 mm	x		
HS 6617, GSS6717	6020724572	6610/6710用専用台車 AHT PD	200 kg	840 mm	x		x
HS 6620, GSS6720	6020723072	6610/6710用専用台車 高さ可変	200 kg	990 mm	x		
HS 6620, GSS6720	6020724572	6610/6710用専用台車 AHT PD	200 kg	990 mm	x		x

オプション ハーフレングスロードキャリア (2つのロードキャリアを滅菌器に搬入)

(短い長さでオートマチックローディングシステムへ接続用)

オプション (下記)

滅菌器	商品コード	商品名	最大積載量	積載可能長さ	AHT	SAL	PD
HS 6617 GSS6717	6020723176	6617/6717用専用台車 AHT HL UN-/L	200 kg	840 mm	x		

バスケットフィーダー用ローディングトロリー – Getinge 66, 67

バスケットフィーダーと共にローディングトロリーは滅菌器へバスケットの手動搬入を可能にします。

滅菌器	商品コード	商品名	最大積載量	バスケットフィーダー
HS6606	6020720670	6606用専用台車	125 kg	564613070CE
HS6610, GSS6710	6020720672	6610/6710用専用台車	125 kg	564613270CE
HS6613, GSS6713	6020720674	6613/6713用専用台車	125 kg	564613470CE
HS6617, GSS6717	6020720676	6617/6717用専用台車	125 kg	564613670CE



SMART オプション

オプション (下記)

滅菌器	商品コード	商品名	最大積載量	バスケットフィーダー	AHT	SAL	PD
HS 6610, GSS6710	6020723072	6610/6710用専用台車 高さ可変	125 kg	564613270CE	x		
HS 6610, GSS6710	6020724572	6610/6710用専用台車 AHT PD	125 kg	564613270CE	x		x
HS 6613, GSS6713	6020723074	6613/6713用専用台車 高さ可変	125 kg	564613470CE	x		
HS 6613, GSS6713	6020724574	6613/6713用専用台車 AHT PD	125 kg	564613470CE	x		x
HS 6617, GSS6717	6020723076	6617/6717用専用台車 高さ可変	125 kg	564613670CE	x		

*バスケットの積載限度は125 kg

オートマチックバスケットローダー/ アンローダー用トロリー – Getinge 66, 67

このローディングトロリーは、バスケット用のオートマチックローダー/アンローダー仕様の滅菌器への積載/積降の際に利用可能です。滅菌器に直接接続して使用することはできません。



SMART オプション

オプション (下記)

オートマチックローダー/ アンローダー	商品コード	商品名	最大積載量	AHT	SAL	PD
HS 6610, GSS6710	6020727072	6610/6710用専用台車 高さ可変	125 kg	x		
HS 6613, GSS6713	6020727074	6613/6713用専用台車 高さ可変	125 kg	x		

ウォッシャーディスインフェクター用ローディングトロリー

洗浄ラック*用のローディングトロリーです。ウォッシャーディスインフェクター 8666/8668/88T/CM320 及びオートマチックシステム 2.0 と接続することが可能です。

シングルエンドローディング

ウォッシャーディスインフェクター	商品コード	商品名	最大積載量
8666/8668/88T/CM320	6020720171	ラック用台車 8666・8668・88用 (ドレーン付)	165 kg

ダブルエンドローディング

ウォッシャーディスインフェクター	商品コード	商品名	最大積載量
8666/8668/88T/CM320	6020720172	ラック用台車 8666・8668・88用 (ドレーン付) 両サイト	165 kg



オプション シングルエンドローディング

オプション (下記)

ウォッシャーディスインフェクター	商品コード	商品名	最大積載量	AHT	SAL	PD
8666/8668/88T/CM320	6020720271	ラック用台車 AHT 8666・8668・88用 (ドレーン付)	165 kg	x		

* 洗浄ラックは別途ご購入が必要です。



SMART ディストリビューショントrolley

人間工学に基づいた搬送効率

Getinge SMART ディストリビューショントrolleyは、バスケットおよび/またはコンテナを効果的で人間工学に基づいて搬送するための設計となっています。病院の中の包装エリア、滅菌エリアそして不潔エリアからの搬入出に使用されます。




ディストリビューショントロリー ハードカバー

このトロリーで、器材コンテナやバスケットを院内搬送又は外部の施設への搬送の為に器材、リネン、 Disposable 製品、麻酔器材にグループ分けすることができます。

ハードカバーは埃と輸送のダメージから滅菌器材を護ります。

- ・シンプルで安全な搬送
- ・人間工学的
- ・Getinge のカートウォッシャー・ディスインフェクターで洗浄、消毒することができます。

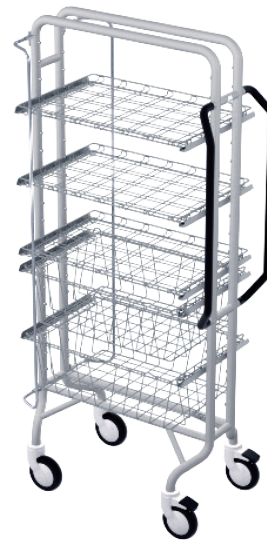

ディストリビューショントロリー オープン

このトロリーはモジュール式のバスケットとコンテナのためのモバイル式保管棚です。

開放されたデザインによって、個包装の内容を容易に確認でき簡単に取り出すことが出来ます。棚とバスケットは安全に搬送するために簡単に固定されます。

- ・積載、積降が容易
- ・保管スペースの削減
- ・静かで簡便な操作性
- ・Getinge のカートウォッシャー・ディスインフェクターで洗浄、消毒することができます。



ドアは260°開くことが出来、積載・積降に非常に便利な開放ポジションで固定できます。取手はオプションのロックを取り付けることが出来ます。トロリーの利用効率を最大にするため棚受けは移動させることが出来ます。



サポートガイドと棚を自由に配置することでトロリーの利用効率を最大化します。



最大5枚の棚を使用することが可能です。棚は3枚、標準で装備されています。追加の棚はオプションの格納スペースで保管可能です。各棚は搬送中、積載物を保持するために各所に2つの仕切が設けられています。



トロリーは両側から積載、積降が出来ます。棚とバスケットの仕様を容易にするため中間位置まで引き出すことが可能です。



トロリーの操作を容易にするために、トロリーには、直径160mmのストッパー付キャスター（回転可能なタイプと回転不可のタイプ）がそれぞれ2つずつついています。オプションのピンと牽引バーを使用すると、トロリーの牽引が可能になります。



高品質の回転可能なキャスター（両輪にストッパー付）は最大積載時でもスムーズな動きを可能にし、トロリーを容易に移動させることが可能です。

SMART ディストリビューショントロリー

仕様

Getinge SMART ディストリビューショントロリーは、いつも安全で効率的な搬送を可能にします。ハードカバーモデルは埃とダメージから滅菌器材を保護し、オープンモデルはモジュール式のバスケットとコンテナの搬送を可能にします。



ディストリビューショントロリー ハードカバー (DTHC)

商品コード	容量	オプション (商品コード)	最大積載量	トロリー寸法 (LxWxH)
564719070	6又は8 SPRI/ISO 深型* 又は 15 DIN StU ½ サイズ**	564719071 ワイヤースェルフ (仕切2付) 564719075 ビン&バー (×2)	145 kg /	1286 x 699 x 1502 mm

*SPRI 深型: 585 × 395 × 195 mm . ISO 深型: 600 × 400 × 195 mm (8 SPRI/ISO, の場合追加のシェルフ1枚必要)

**DIN StU ½ サイズ: 575 × 280 × 135 mm



DTO ダブル (シェルフ)
商品コード：564718970



DTO シングル (ミックス)
商品コード：564718370



DTO シングル SPRI (5 段)
商品コード：564718170
(バスケットは付属されません)



DTO シングル (シェルフ)
商品コード：564718570
(コンテナは付属されません)

Getinge SMART オープンディストリビューシヨントロリーはシングルとダブルのそれぞれのモデルからお選びいただけます：

- ・標準積載物のための3つのモデル。

バスケット用のガイド、コンテナ用のシェルフ (棚)、若しくはミックス。

- ・個別設定が可能なモデル。

基本モデルとして、顧客の個別設定 (棚および/または、バスケットを混載するなど) の構成に合わせて、ガイドの種類を指定したり、発注を分けることが可能。

ディストリビューシヨントロリー オープン (DTO)

DTO シングル

積載物の種類	商品名	商品コード	最大積載量	寸法 (L×W×H)
バスケット	DTO シングル SPRI, 10 浅型 or 5 深型	564718170	85 kg	736 × 429 × 1577 mm
ミックス	DTO シングル, 2 SPRI 型/3 シェルフ	564718370	85 kg	736 × 429 × 1577 mm
シェルフ	DTO シングル, 5 シェルフ	564718570	85 kg	736 × 429 × 1577 mm
個別設定	DTO シングル ベース (ガイドなし)	564718070	85 kg	736 × 429 × 1577 mm

DTO ダブル

積載物の種類	商品名	商品コード	最大積載量	寸法 (L×W×H)
バスケット	DTO ダブル SPRI, 20 浅型 又は 10 深型	564718770	170 kg	1416 × 429 × 1577 mm
ミックス	DTO ダブル, 4 SPRI 深型 6 シェルフ	564718870	170 kg	1416 × 429 × 1577 mm
シェルフ	DTO ダブル, 10 シェルフ	564718970	170 kg	1416 × 429 × 1577 mm
個別設定	DTO ダブルベース (ガイドなし)	564718670	170 kg	1416 × 429 × 1577 mm

シングル、ダブル用 オプション

商品名	商品コード	最大積載量	寸法 (L×W×H)
SPRI 用ガイドペア	564718171	18 kg	30 × 425 × 50 mm
ISO 用ガイドペア	564728271	18 kg	30 × 425 × 50 mm
シェルフおよびガイドペア	564718571	18 kg	30 × 425 × 50 mm
院外搬送用トランスポートロック	564718470		
ディスプレイカバーラック	560181301		
ディスプレイカバー透明カバー, 50 pcs/roll	560125070		
リユースカバー DTO シングル	6003000052		
リユースカバー DTO ダブル	6003000053		



ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL : 03-5463-8313 FAX : 050-3000-1988

第1種医療機器製造販売業許可番号 : 13B1X00176

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp